


Рхуsiотесhниса



БЕСКОНТАКТНАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ КУШЕТКА
«АКВАСПА»

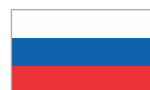

РАЗРАБОТАНО И
ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ
В РОССИИ



Кушетка бесконтактного гидромассажа АКВАСПА

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО ГИДРОМАССАЖА «АКВАСПА» - ЭТО НОВЕЙШЕЕ РОССИЙСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ГИДРОМАССАЖА БЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА ПАЦИЕНТА С ВОДОЙ.




Преимущества:

- » Оптимальная длина и высота кушетки позволяют комфортно разместиться на ней пациенту практически любого роста и телосложения.
- » Два типа кронштейна с ЖК монитором предназначены для комфортного управления процедурой персоналом или самим пациентом.
- » Кушетка производится с тремя типами мембраны: светопрозрачной с системой хромотерапии, каучуковой синего или черного цвета. Мембраны позволяют выдерживать распределенную нагрузку до 150 кг.
- » Улучшенная система гидрофорсунок обладает более мощным массажным воздействием как по площади, так и по силе.
- » Обновленное ПО с удобным интерфейсом оптимально для управления процедурой.
- » Эффективная система охлаждения позволяет проводить процедуры не опасаясь перегрева.
- » Кушетка может быть выполнена в любом цветовом исполнении по палитре RAL, а также при индивидуальном заказе может быть нанесен аэрографический рисунок.



Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСПА» снабжена системой подогрева воды в диапазоне 30-35°C, что способствует полному расслаблению и релаксации пациента, а в случае использования кушетки для проведения различных типов обертываний, мягкий эффект тепла способствует пролонгации и усилению терапевтического эффекта процедуры.

По эффективной площади воздействия на тело человека среди подобных изделий кушетка «Акваспа» не имеет аналогов на российском рынке!

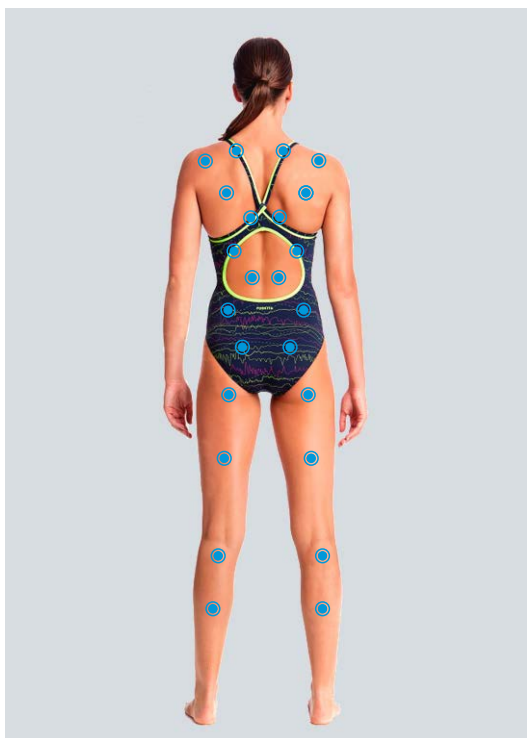

Программы массажа:

СТАНДАРТНЫЙ

Последовательное включение каждой из 6-ти зон массажа с интервалом в 23 сек. гидромассаж начинается с зоны верхнего плечевого пояса, последовательно происходит движение массажных струй вдоль всего тела человека по всем возможным массажным точкам каждой из зон массажа до зоны икроножных мышц.

ВОЛНА

Последовательное включение каждой из 6-ти зон массажа с интервалом в 16 сек. гидромассаж начинается с зоны верхнего плечевого пояса, последовательно происходит движение массажных струй вдоль всего тела человека по всем возможным массажным точкам до зоны икроножных мышц.

ЛИМФОДРЕНАЖ

включает в себя прохождение 6 массажных зон вдоль всего тела человека с зоны мышц нижних конечностей до области верхнего плечевого пояса через все массажные точки воздействия (алгоритм обратный режиму «Волна»).

ИНТЕНСИВНЫЙ

попарное включение зон: мышц плечевого и грудного отдела, пояснично-крестцового отдела и зоны мышц нижних конечностей с интервалом в 23 сек.

ИМПУЛЬСНЫЙ

Последовательное включение каждой из 6-ти зон массажа с интервалом в 15 сек, при переходе от одной зоны к следующей, включается предыдущая зона 3 раза по 1 сек, через 1 сек. гидромассаж начинается с зоны верхнего плечевого пояса, последовательный переход движения массажных струй вдоль всего тела человека по всем возможным массажным точкам.

ФИТНЕС

комбинация вышеуказанных режимов в заданном промежутке времени.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

предполагает выбор одновременной работы любой одной или двух массажных зон из 6-ти в течение заданного оператором времени.

Применение в медицинской практике:

успешно применяется в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях, SPA – салонах и оздоровительных комплексах, центрах эстетической медицины и косметологии, в кабинетах психоэмоциональной разгрузки и релаксации, в центрах реабилитации инвалидов, в спортивной медицине для релаксации после интенсивных нагрузок.

Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСПА» также используется в косметических обертываниях, грязелечении, талассотерапии, пилингах, ручном массаже.

Эффекты применения:

- ▶▶ происходит расслабление спазмированных мышц, благодаря этому уходит дискомфорт и болевые ощущения;
- ▶▶ улучшается кровоснабжение массируемых тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышечного и суставного аппарата), соответственно улучшается их питание и снабжение кислородом;
- ▶▶ восстанавливается венозный и лимфатический отток, что способствует устранению отёчности и выведению шлаков и токсинов из организма. Это свойство незаменимо при хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также в программах очищения и детоксикации;
- ▶▶ активизируются обменные процессы в организме, что благотворно сказывается на общем состоянии организма, значительно повышается расход калорий. Это особенно полезно в программах по снижению веса;
- ▶▶ происходит нормализация работы внутренних органов путём реализации рефлекторных механизмов при воздействии на паравертебральные зоны и биологически активные точки – идеальный вариант при комплексном лечении хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем;
- ▶▶ снятие усталости и напряжённости, восстановление психоэмоционального равновесия способствуют улучшению настроения и общего самочувствия, повышению жизненного тонуса, быстрому восстановлению работоспособности.

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» от «Физиотехника»

- ▶ имеет регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ
- ▶ входит в приказы об оснащении №279Н, №878Н, №69Н.

Акваспа	Кушетка АКВАСПА (с системой электронного индивидуального программирования массажа)	Кушетка АКВАСПА (с функцией одновременного гидромассажа по 12 точкам)	Кушетка АКВАСПА (водяная для лечебных обертываний с подогревом)
Назначение			
Талассотерапевтические обертывания	+	+	+
Бесконтактный массаж	+	+	-
Характеристики			
Габариты в сборе, ДхШхВ, мм	2450х1100х1160	2450х1100х590	2450х1100х590
Габариты корпуса, ДхШхВ, мм	2450х1100х590	2450х1100х590	2450х1100х590
Масса, кг	180	180	180
Общий объем заливаемой воды, л	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%
Температурный режим, °С	30-35	30-35	30-35
Время нагрева от комнатной темп. 18°С до 32°С, мин.	120	120	120
Количество программ гидромассажа	7	1	-
Количество гидрофорсунок	24	12	-
Количество зон гидромассажа	6	6	-
Программируемый зональный массаж	+	-	-
Программируемый нагрев лежа	+	-	-
Макс. распределенная нагрузка на ложе, кг	150	150	150
Синее или черное каучуковое ложе, 3мм	+	+	+
ЖК сенсорный экран	+	-	-
Номинальное напряжение, В	220	220	220
Максимальная потребляемая мощность, кВт	3,5	3,0	2
Опции			
Светопрозрачное ложе с хромотерапией	+	+	+
Степень одноуровнея	+	+	+

Physiotecnica

 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
 +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
 info@pt-med.ru  www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер