


Physiotecnica

производство водолечебного оборудования



«ВУОКСА»

ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ
КАФЕДРЫ И ДУШИ

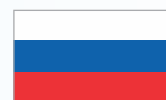

РАЗРАБОТАНО И
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ
В РОССИИ

“Вуокса”

водолечебные кафедры

Водолечебная кафедра «Вуокса» – это комплекс специального оборудования, который широко используется для бальнеологических процедур в санаториях и лечебных центрах в России и в других странах.

Особенность кафедры «Вуокса»:

Управление всеми душами производится с одного пульта, количество поставляемых душей определяется заказчиком. ООО «Физиотехника» предлагает шесть основных комплектаций кафедры, которые можно выполнить в любом цвете по палитре RAL.

Основные модели кафедры «Вуокса»:

- ▶ Модель «Экстра» (душ Шарко две струи, циркулярные души «Модерн» и «Классика» с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, термостат 1 ¼, одновременная работа всех терапевтических душей)
- ▶ Модель «Оптима» (душ Шарко две струи, циркулярный душ с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, термостат ¾)
- ▶ Модель «Стандарт» (душ Шарко две струи, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ, смеситель, 4 крана)
- ▶ Модель «Эконом Оптима» (душ Шарко одна струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ, термостат)
- ▶ Модель «Эконом» (душ Шарко одна струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, смеситель, 2 крана)
- ▶ Модель «Настенная панель» (регулировка температуры воды осуществляется термостатом, струевой душ, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой)

Дополнительно:

- ▶ Насосные станции
- ▶ Экран отбойный и шторка для циркулярного душа
- ▶ Система Кнайпа к кафедре (только к мод. «Оптима», «Экстра») – быстрая смена температуры воды в одном струевом душе
- ▶ Нестандартный цвет по палитре RAL





Назначение процедур:

Струевой душ (Шарко) :

- ▶ для повышения тонуса мускулатуры;
- ▶ для уменьшения толщины жирового слоя (в том числе при целлюлите);
- ▶ при остеохондрозе позвоночника и первичных остеоартрозах крупных суставов;
- ▶ в комплексной терапии неврозов, неврастенических состояний, нейродистонии, артериальной гипертензии I-II ст.;
- ▶ при нейрогенных формах импотенции;
- ▶ при бессоннице;
- ▶ при лечении запоров, связанных со снижением тонуса кишечника;
- ▶ при миозите поясничных мышц, пояснично-крестцовом радикулите;
- ▶ при нестабильном тонусе сосудов;
- ▶ при синдроме хронической усталости;
- ▶ физиопрофилактика.

Пациент стоит на расстоянии 3–4 метров от душевой кафедры.

Шотландский душ (контрастный).

На тело пациента поочередно по несколько раз воздействуют двумя струями воды: горячей 37°C–45°C и холодной 20°C–10°C. Данный душ оказывает тонизирующее действие, улучшается кровоснабжение и трофика тканей, повышается иммунитет.

Циркулярный душ.

Позволяет проводить точечный массаж всего тела пациента. Душ оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему, улучшает кровоснабжение кожных покровов.

Оптимальное давление для данной процедуры – 1,5 атм. Температуру воды постепенно понижают с 36°C при первых процедурах до 25°C к концу лечения.

Восходящий душ:

Предназначен для массажных, лечебных (при гинекологических заболеваниях, урологических патологиях, пояснично-крестцовый радикулит и т.д.) и очистных процедур, которые предоставляются сидящему пациенту.

Эта процедура стимулирует кровообращение, укрепляет мышцы таза, способствует нейтрализации очагов воспаления.

Душ оснащен поясничной массажной форсункой.

Температуру и давление воды врач определяет самостоятельно, в зависимости от типа заболевания, пола и конституции пациента.




При недостаточном или нестабильном давлении в сетевом трубопроводе компания «Физиотехника» предлагает в качестве вспомогательного оборудования насосные станции для повышения давления воды.

Корпус панели управления водолечебной кафедры «Вуокса» может быть выполнен в любом цветовом исполнении по палитре RAL, что позволяет угодить различным требованиям авторского дизайна.

«Вуокса» водолечебные кафедры	Кафедра водолечебная «Вуокса» «Экстра»	Кафедра водолечебная «Вуокса» «Оптим»	Кафедра водолечебная «Вуокса» «Стандарт»	Кафедра водолечебная «Вуокса» «Эконом»	Кафедра водолечебная «Вуокса» «Настенная панель»
Технические характеристики					
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) Пульт управления	1050х630х1100	1050х630х1100	1050х630х1100	600х130х1185	
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) Циркулярный душ (с дождевым/без дождевого душа)	920х820х2450 (1500)	920х820х2450(1500)	920х820х2450 (1500)	920х820х2450 (1500)	
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) Восходящий душ	480х560х880	480х560х880	480х560х880	480х560х880	
Масса оборудования пульт управления, кг	40	40	40	30	
Масса оборудования циркулярный душ с дождевым, кг	25	25	25	25	
Масса оборудования Восходящий душ, кг	8	8	8	8	
Необходимое давление в подводящем трубопроводе, бар (кгс/см ²)	от 5 до 6	от 4 до 6	от 4 до 6	от 4 до 6	
Рабочее давление процедур, бар (кгс/см ²)	от 1 до 5	от 1 до 5	от 1 до 5	от 1 до 5	

С 2026 года в комплектацию поставки входят новые краны для панели кафедр «ВУОКСА» производства «Физиотехника».

Главная цель обновления — повышение удобства управления проведения процедур Душа «Шарко», восходящего и циркулярного душей.

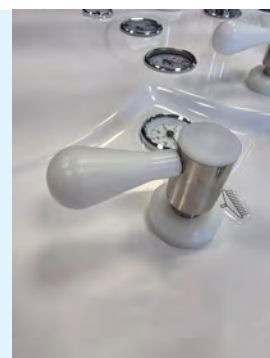

Экстра



Оптим»



Стандарт



Эконом

Physiotechnica

188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
+7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
info@pt-med.ru www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер