


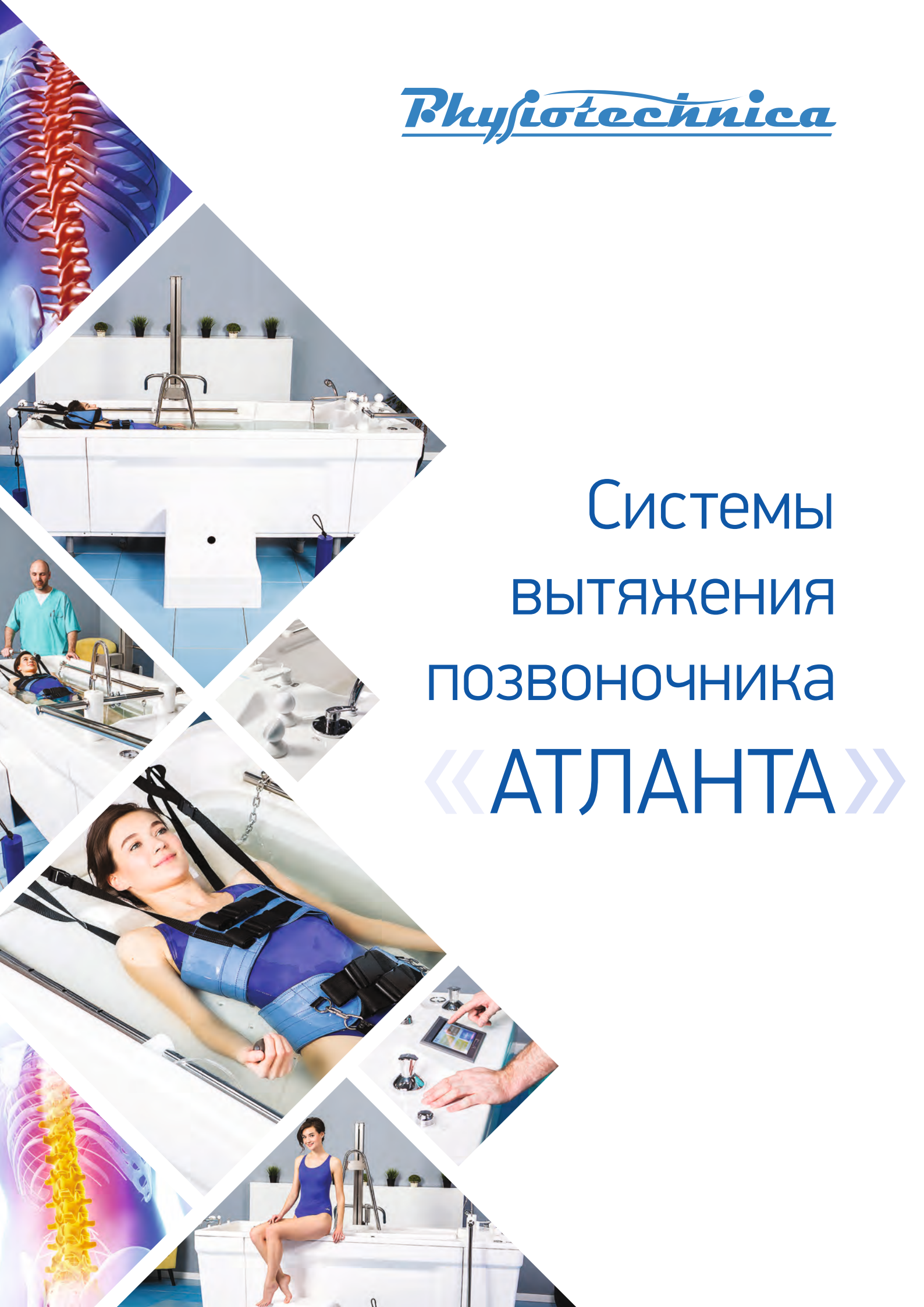

Physiotecnica

Системы
вытяжения
позвоночника
«АТЛАНТА»

СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА «АТЛАНТА»

Еще в 1966 году советским хирургом В. А. Лисуновым впервые был представлен метод подводного вытяжения, при котором больного укладывали на наклонный щит в ванну и фиксировали за верхнюю часть тела с помощью специального корсета, а груз крепили за поясничный корсет. Данная технология применялась для лечения дискогенных радикулитов и ряда других заболеваний позвоночника.



В 2015 году компанией Физиотехника был разработан современный комплекс оборудования «Атланта», включающий в себя подъемник с ложем с изменяемым углом наклона и ванны большого объема. Компания Физиотехника выпускает две модификации ванны – с электронным тяговым блоком, управляемым с цветного ЖК дисплея, и ванну с классическим тяговым устройством, где сила вытяжения создается с помощью рычага и прикрепленных к нему гирь. Ванны могут быть оснащены большим количеством различных опций по желанию покупателя.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА «АТЛАНТА»:

- ▶ возможность вытяжения трех зон позвоночника одновременно;
- ▶ вытяжение шейного и грудного отделов позвоночника;
- ▶ мобильность и удобство использования всех элементов комплекса как вместе, так и отдельно, для других бальнеологических процедур;
- ▶ комбинирование процедуры вытяжения с полноценными процедурами подводного душ-массажа;
- ▶ надежность и безопасность комплекса, т. к. он позволяет в случае плохого самочувствия быстро поднять и переместить пациента из ванны на автономном подъемнике;
- ▶ возможность перемещать пациента после процедуры непосредственно на кушетку для отдыха;
- ▶ проведение большего количества процедур за единицу времени, благодаря широкой линейке дополнительных опций;
- ▶ проведение процедур в минеральной воде;
- ▶ комплекс прост и удобен в обслуживании – нет труднодоступных мест для гигиенической обработки ванны.



Использование ванны «Атланта», как универсальной для процедур вытяжения позвоночника и процедур подводного душ массажа позволяет экономить место в медицинских учреждениях и повышает рентабельность оборудования.



Комплекс
физиотерапевтический
«Атланта»
с электронной системой
подводного горизонтального
вытяжения позвоночника





Комплекс физиотерапевтический «Атланта»

с **электронной системой** подводного
горизонтального вытяжения позвоночника

Габаритные размеры комплекса 2600×1000×1015 мм


Полезный объем 800 л

Масса 225 кг

Базовая комплектация:

- ▶ ванна прямоугольной формы «Атланта»;
- ▶ электронная система вытяжения позвоночника;
- ▶ электрический подъемник;
- ▶ комплект корсетов (бандажей);
- ▶ двухуровневая ступень;
- ▶ съемный подголовник



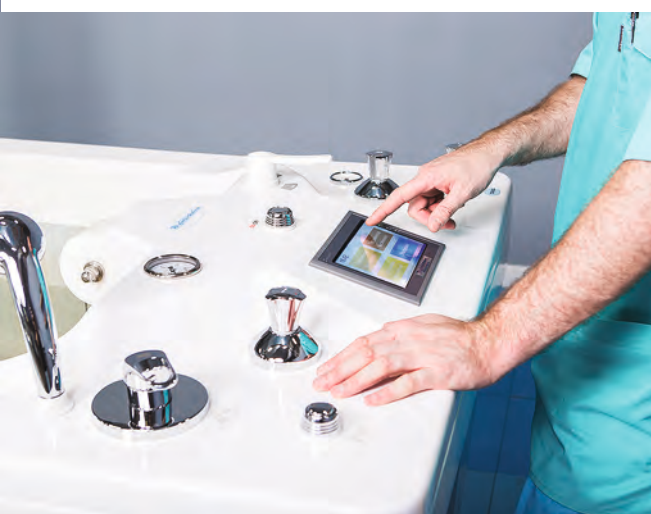

Особенности:

- » система контроля тракционного усиления осуществляется за счет электронного блока управления. Программа позволяет запоминать и выполнять сложные последовательности натяжения, чередуемого с ослаблением, по заданным параметрам;
- » в ванне можно проводить полноценные процедуры подводного душ-массажа пациентам любого роста и комплекции;
- » за счет большой длины лежа и конструкции подголовника процедуры ПДМ можно комфортно проводить пациенту, лежащему в ванне на животе или спине;
- » специально разработанный для проведения процедур подводного горизонтального вытяжения подъемник обеспечивает плавное погружение и комфортное размещение пациента в ванне;
- » подъемник оснащен электрическим приводом и аккумуляторной батареей для автономной работы;
- » подъемник может быть изготовлен полностью из нержавеющей стали (для ванн со слабоминерализованной водой);
- » в качестве меры безопасности предусмотрена пневматическая груша. При ее нажатии, в случае плохого самочувствия, возможна экстренная остановка процедуры пациентом, на дисплее отображается соответствующая надпись.



Комплекс
физиотерапевтический
«Атланта»
с механической системой
подводного горизонтального
вытяжения позвоночника






Комплекс физиотерапевтический «Атланта»

с механической системой подводного горизонтального вытяжения позвоночника

Габаритные размеры комплекса	2600×1000×1015 мм
Полезный объем	800 л
Масса	150 кг

Базовая комплектация:

- ▶ ванна прямоугольной формы «Атланта»;
- ▶ механическая система вытяжения позвоночника (штанга с системой крепежей для гирь, комплект гирь);
- ▶ электрический подъемник;
- ▶ комплект корсетов (бандажей);
- ▶ двухуровневая ступень;
- ▶ съемный подголовник.

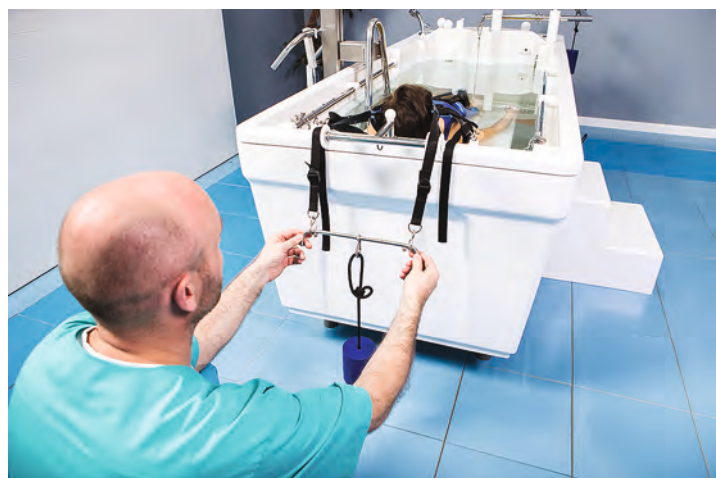



Особенности:

- ▶ многофункциональная, исключительно надежная, гидротерапевтическая установка по доступной цене;
- ▶ проведение процедур статического вытяжения с помощью системы рычагов и гирь;
- ▶ в ванне можно проводить полноценные процедуры подводного душ-массажа пациентам любого роста и комплекции;
- ▶ за счет большой длины ложа и конструкции подголовника процедуры ПДМ можно комфортно проводить пациенту, лежащему в ванне на животе или спине;
- ▶ специально разработанный для проведения процедур подводного горизонтального вытяжения подъемник обеспечивает плавное погружение и комфортное размещение пациента в ванне;
- ▶ подъемник оснащен электрическим приводом и аккумуляторной батареей для автономной работы;
- ▶ подъемник может быть изготовлен полностью из нержавеющей стали (для ванн со слабоминерализованной водой).



	Ванна Атланта с электронной системой вытяжения	Ванна Атланта с механической системой вытяжения
Ванна, (ДхШхВ), мм	2600×1000×1015 (без подъемника)	2600×1000×1015 (без подъемника)
Подъемник, (ДхШхВ), мм	1750х1075х1880	1750х1075х1880
Усилие вытяжения позвоночника, кг	5–60	5–60
Возможность комбинированного вытяжения нескольких отделов с разным усилием	☒	☒
Блок управления процедурой	Электронный ЖК дисплей с сенсорным экраном	Рычаг с гирями
Возможность проведения переменного вытяжения	☒	☐
Возможность сохранять данные о процедуре в блоке управления	☒	☐
Возможность аварийной остановки процедуры в случае плохого самочувствия пациентом	☒	☐
Возможность проведения процедуры в ванне с минеральной водой	☒	☒
Дополнительное оснащение шлангом для подводного душ-массажа	☒	☒
Дополнительное оснащение системой аэромассажа	☒	☒
Дополнительное оснащение системой хромотерапии	☒	☒
Дополнительное оснащение системой быстрого слива воды	☒	☒

Physiotecnica

 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
 +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
 info@pt-med.ru  www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер