


Physiotecnica

производство водолечебного оборудования

ВАННА СУХОГО ФЛОАТИНГА

«ПОСЕЙДОН» С ГИДРОМАССАЖЕМ

представлена в двух модификациях -
для взрослых и *для детей* ♥

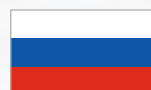

РАЗРАБОТАНО И
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ
В РОССИИ



Ванна сухого флоатинга Посейдон

Код вида: 343370 Ванна для сухого гидромассажа
Входит в приказ об оснащении: 279н 878н

Габаритные размеры (ванны)	2610x1455x915 мм
Объем заливаемой воды	1550 литров
Потребляемая мощность	Не более 3,5 кВт

FLOAT (АНГЛ.) - ПЛАВАТЬ, ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ФЛОАТИНГА. ВСЕ ОНИ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ПОГРУЖЕНИИ В ВОДУ, НО ЕСТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ: ОНИ МОГУТ БЫТЬ КАК ВЛАЖНЫЕ, ТАК И СУХИЕ, С КОНТАКТОМ И БЕЗ КОНТАКТА С ВОДОЙ СООТВЕТСТВЕННО. СУХАЯ ИММЕРСИЯ – ЭТО ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ВАННЫ «ПОСЕЙДОН».

Показания к применению:

- ▶ при болях, лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, при реабилитации после болезней и травм
- ▶ ДЦП (детский церебральный паралич)
- ▶ при необходимости быстрого восстановления сил и повышении адаптивных возможностей организма
- ▶ при работе и образе жизни, связанными с постоянным напряжением и стрессом
- ▶ для достижения состояния расслабления и восстановления психоэмоционального равновесия
- ▶ для омоложения организма, профилактики преждевременного старения
- ▶ для пробуждения креативности мозга (отзывы тех, кто пробовал флоатинг, говорят о том, что процедура напоминает «сон наяву» – человек находится на грани сна и бодрствования, что стимулирует работу мозга и способствует пробуждению творческих способностей).

Основным преимуществом системы сухого флоатинга перед контактным, где пациент ложится непосредственно в концентрированный водный раствор соли, является безопасность процедуры, отсутствие у пациента страха захлебнуться, возможность принять удобную позу, лежа на спине или боку, отсутствие противопоказаний, связанных с контактом с соляным раствором, возможность проведения сеанса в одежде.

Регулярное посещение процедур флоатинга (иммерсии) рекомендовано беременным женщинам, которые страдают от повышенной нагрузки на позвоночник и стрессовых состояний.

Ванна «Посейдон» представлена в 2х версиях - для взрослых и для детей.

Модель сухого флоатинга «Посейдон» разрабатывалась в первую очередь как медицинское оборудование, но также может поставаться в версии для частного использования. Оборудование по своим техническим характеристикам не имеет аналогов на Российском рынке!

Ванна Посейдон представляет собой емкость, наполненную водой и воздухом, с герметично прикрепленной к бортикам прочной водонепроницаемой мембраной.







Флоатинг позволяет человеку полностью расслабиться и избавиться от стресса без применения фармацевтических препаратов, восстановить силы после тяжелого рабочего дня или спортивного соревнования. Оборудование позволяет создать незабываемое ощущение «невесомости на земле»





Лечебное воздействие

В основе лечебного воздействия ванны сухого флоатинга «Посейдон» лежит методика сенсорной депривации - частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или несколько органов чувств, что позволяет существенно снизить поток нервных импульсов в центральную нервную систему, способствуя полному расслаблению тела. В отличие от аналогичных систем, где пациент непосредственно принимает процедуру в воде, флоат система «Посейдон» обеспечивает большую безопасность и гигиеничность. У пациента отсутствует страх захлебнуться, при этом имитируется полное ощущение, что он нахо

Внешний вид

Технически ванна Посейдон представляет собой емкость, наполненную водой и воздухом, с герметично прикрепленной к бортикам прочной мембраной. Управление осуществляется с цветного ЖК дисплея. Уникальной особенностью флоат системы Посейдон является возможность проведения массажных процедур. Под ванной расположены насосы производительностью до 50000 литров час, создающие дополнительный релаксационный эффект за счет восходящего потока воды и воздуха и встроенные динамики для Bluetooth подключения.

Методика проведения процедуры

Для проведения процедуры пациент укладывается на предварительно расправленную ткань. Врач задает общее время процедуры. Параметр гидромассажа задается в интервале от 1 до 30 минут, по истечении которого он автоматически отключается. Возможен отпуск процедуры без гидромассажа.

Для удобства персонала заданные параметры сохраняются в память устройства. После запуска программы ложе плавно опускается. После того, когда время процедуры истечет, ложе подымается автоматически.



Также ванна флоатинга оснащена виброакустикой. Это система вибрационной передачи звука через воду, посредством устанавливаемых 2х вибродинамиков по периметру ванны. Виброакустическая терапия - это контактное и локальное воздействие микровибрациями звуковой частоты на ткани организма человека. При помощи физического воздействия на организм улучшается нарушенная микроциркуляция крови и лимфы в тканях и органах.

Расслабление в невесомости

Флоат система Посейдон создает для человека условия, при которых он может максимально расслабиться, избавиться от стресса без применения фармацевтических препаратов, восстановить силы после тяжелого рабочего дня или спортивного соревнования. Оборудование позволяет создать незабываемое ощущение «невесомости на земле».

Применение в медицинской практике:

успешно применяется в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях, SPA – салонах и оздоровительных комплексах, центрах эстетической медицины и косметологии, в кабинетах психоэмоциональной разгрузки и релаксации, в центрах реабилитации инвалидов, в спортивной медицине для релаксации после интенсивных нагрузок.

Эффекты применения:

- ▶ происходит расслабление спазмированных мышц, благодаря этому уходит дискомфорт и болевые ощущения;
- ▶ восстанавливается венозный и лимфатический отток, что способствует устранению отёчности и выведению шлаков и токсинов из организма. Это свойство незаменимо при хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также в программах очищения и детоксикации;
- ▶ улучшается кровоснабжение массируемых тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышечного и суставного аппарата), соответственно улучшается их питание и снабжение кислородом;
- ▶ активизируются обменные процессы в организме, что благотворно сказывается на общем состоянии организма, значительно повышается расход калорий. Это особенно полезно в программах по снижению веса;
- ▶ происходит нормализация работы внутренних органов путём реализации рефлекторных механизмов при воздействии на паравертебральные зоны и биологически активные точки – идеальный вариант при комплексном лечении хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем;
- ▶ снятие усталости и напряжённости, восстановление психоэмоционального равновесия способствуют улучшению настроения и общего самочувствия, повышению жизненного тонуса, быстрому восстановлению работоспособности.

Посейдон	Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем	Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем детская
Габаритные размеры (без монитора) ДхШхВ, мм	2610х1455х915	1920х1150х915
Масса ванны (без воды), кг	не более 370	не более 210
Общий объем заливаемой воды, л	1550±50	700±30
Рабочая температура воды, залитой в резервуар ванны, С	30-35	30-35
Глубина погружения пациента, мм	400±20	350±20
Время спуска-подъема ложа, сек.	30±5	30±5
Количество гидрофорсунок	8	8
Наличие вибродинамиков	+	+
Подключение к bluetooth	+	+
Максимальная масса пациента, кг	180	40
Максимальный рост пациента, см	190	120
Номинальное напряжение сети при частоте 50 Гц, В	220±22	220±22
Потребляемая мощность, кВт	3,5	3,5
ЖК сенсорный экран	+	+
Установка обеззараживания воды ультрафиолетом с автоматическим таймером включения-выключения	+	+
Принадлежность		
Двухступенчатая противоскользящая ступень	+	+

Physiotecnica

- 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понсе 4/1
- +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
- info@pt-med.ru www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер