


Рхуsіотесhнiса

производство водолечебного оборудования



ВАННА ДЛЯ СУХОГО ГИДРОМАССАЖА
«КВАТРОДЖЕТ»

ВАННА ДЛЯ СУХОГО ГИДРОМАССАЖА «КВАТРОДЖЕТ»

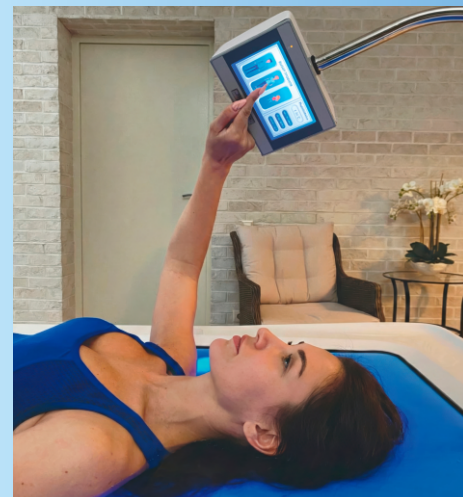

4 ПОДВИЖНЫЕ ФОРСУНКИ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕННОГО АЛГОРИТМА, ПОВТОРЯЯ КОНТУРЫ ТЕЛА И СОЗДАВАЯ МАССИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ С СИЛОЙ ОТ 0,5 ДО 6 АТМОСФЕР.

Ванна для сухого гидромассажа «КВАТРОДЖЕТ» (QUATROJET) предназначена для воздействия на мягкие ткани тела человека при помощи струй воды, но без непосредственного контакта с жидкостью, с целью оказания болеутоляющего действия, устранения хронических воспалительных процессов, улучшения кровоснабжения и трофики массируемых мягких тканей и внутренних органов благодаря рефлекторному механизму, облегчения выведения лишней жидкости из организма, создания расслабляющего и успокаивающего эффекта, активизации метаболизма.



Ванна предназначена для использования в медицинских и оздоровительных учреждениях широкого профиля (физиотерапевтические кабинеты клиник и поликлиник, а также оздоровительные и СПА центры, санатории, релаксационные центры).

С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ВАННЫ «КВАТРОДЖЕТ»:

- ▶ Выбор программы массажа («Общий», «Лечебный», «Релакс», «Ноги», «Спина», «Шея и плечи»).
- ▶ Введение роста пользователя от 100 до 190 см.
- ▶ Установка времени процедуры длительностью от 5 до 30 мин с шагом установки 1 мин.
- ▶ Управление работой гидрофорсунок в процессе проведения процедуры (включение на работу либо всех четырех гидрофорсунок, либо двух неподвижных, либо двух вращающихся).
- ▶ Регулирование величины давления струи воды из гидрофорсунок (при работе двух любых гидрофорсунок – максимальное давление (6 ± 1) атм.; среднее давление (4 ± 1) атм. и минимальное давление (2 ± 1) атм.; при работе четырех гидрофорсунок – максимальное давление (3 ± 1) атм.; среднее давление ($1,5\pm 0,5$) атм.; минимальное давление ($0,5\pm 0,2$) атм..
- ▶ Нагревание воды в резервуаре кушетки в диапазоне от $+26^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ с шагом установки температуры нагрева 1°C .
- ▶ Подсветка дна кушетки, что позволяет подсвечивать пол помещения.
- ▶ Выключение гидронасоса, вентилятора после окончания времени процедуры и установка форсунок в исходное положение.

Как проходит процедура? Пациент ложится на поверхность эластичной мембраны, которая под его весом немного погружается в воду, обеспечивая полную анатомичность и воссоздание формы тела. Таким образом, он оказывается в состоянии «невесомости». Теплые струи воды через мембрану мягко массируют тело, усиливая релаксационный эффект. Продолжительность процедуры зависит от физического состояния пациента. В среднем, оптимальное время воздействия – 15-20 минут и рекомендуемая частота сеансов – 1-2 раза в неделю.

Применение в санаторно-курортных и спа-центрах. Комплексное применение в СПА программах. Ванна Кватроджет даёт возможность значительно повысить эффективность таких видов процедур, как грязелечение (пелоидотерапия), талассотерапия, косметические обёртывания. Повышение результативности процедур достигается путём их сочетания с бесконтактным гидромассажем – одновременно человек получает и гидромассаж и обёртывание, что раньше было в принципе невозможно.




- ▶ **Хромотерапия** – воздействие цветом (6 различных цветов – зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, оранжевый).
- ▶ **Водяное ложе с подогревом** – максимальный комфорт.
- ▶ **Вибрационная терапия** для большего расслабления.
- ▶ **Простота управления** благодаря встроенным режимам управления на ЖК дисплее.


Основное меню управления ЖК монитора предлагает сразу выбрать один из 3 профилей предустановленных процедур, параметры которых можно будет изменить в процессе процедуры. После выбора одного из типов откроется меню выбора программы массажа.




- **ОБЩИЙ** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести универсальный массаж всего тела.

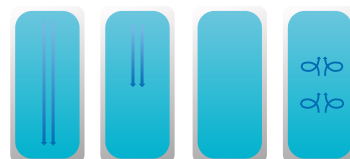


- **ЛЕЧЕБНЫЙ** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести массаж по основным проблемным зонам.

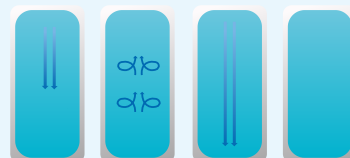


- **РЕЛАКС** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет добиться максимального расслабления мышц пациента.

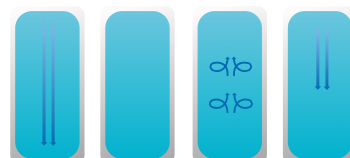


- **НОГИ** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести массаж только зоны ног.

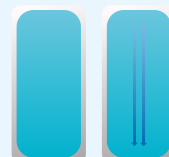


- **СПИНА** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести массаж только зоны спины.

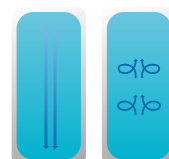

- **ШЕЯ И ПЛЕЧИ** – состоит из следующей комбинации монорежимов. Позволяет провести массаж только шейно-плечевой зоны.

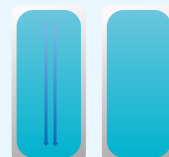

Так же в нижней части экрана представлены шесть монорежимов, рисунок массажа которых неизменен и будет повторяться на всем протяжении времени процедуры.

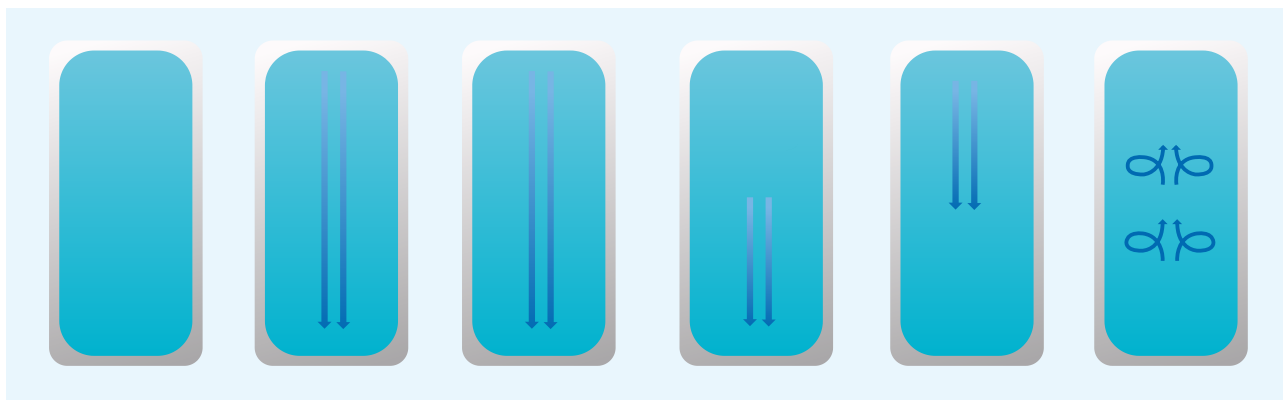

Стандартный цвет декоративного корпуса кушетки белый, однако возможно его исполнение в любом цвете по **палитре RAL***. Также при индивидуальном заказе может быть нанесен аэрографический рисунок*.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Заболевание позвоночника и суставов, ожирение, заболевания кожи, нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь 1 ст., хронические обструктивные заболевания легких, заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата (артроз, остеоартроз, периартрит, гипертонус мышц) вне периода обострения, заболевания центральной и периферической нервной системы (неврозы, вертеброгенные болевые синдромы), нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу, для профилактики при сидячей работе пациентов, лицам, занимающимся тяжелым физическим трудом.

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- » Происходит расслабление спазмированных мышц, благодаря этому уходит дискомфорт и болевые ощущения.
- » Улучшается кровоснабжение массируемых тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышечного и суставного аппарата), соответственно улучшается их питание и снабжение кислородом.
- » Активизируются обменные процессы в организме, что благотворно сказывается на общем состоянии организма, значительно повышается расход калорий. Это особенно полезно в программах по снижению веса.
- » Восстанавливается венозный и лимфатический отток, что способствует устранению отёчности и выведению шлаков и токсинов из организма. Это свойство незаменимо при хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также в программах очищения и детоксикации.
- » Происходит нормализация работы внутренних органов путём реализации рефлекторных механизмов при воздействии на паравerteбральные зоны и биологически активные точки – идеальный вариант при комплексном лечении хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем.
- » Снятие усталости и напряжённости, восстановление психоэмоционального равновесия способствуют улучшению настроения и общего самочувствия, повышению жизненного тонуса, быстрому восстановлению работоспособности.
- » Повышение тургора и эластичности кожных покровов, коррекция фигуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (общие) ДхШхВ, мм	2570х1070х670
Габаритные размеры (ложа) ДхШхВ, мм	2250х750
Масса кушетки (без воды), кг	200
Величина давления струи воды из гидрофорсунок, атм.	0,5-6
Введение параметра роста пациента, см	100-190
Объем воды, заливаемой в резервуар кушетки, л	460-480
Время нагрева воды от температуры 10±1 С° до 34 С°, ч	не более 6
Потребляемая мощность, кВт	3,5
Номинальное напряжение при частоте 50 Гц, В	220±10%
Максимальная распределенная нагрузка на ложе до, кг	150
Рабочая температура воды, залитой в резервуар кушетки, °С	26-35
Количество программ гидромассажа	6
Количество гидрофорсунок	4
Режимы работы	Программный/ручное программирование
Уровень звуковой мощности, дБА	55



Physiotecnica

188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
 +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
 info@pt-med.ru www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер